

Invacare® | **Matrix® Flo-tech® Solution Xtra**
Almofada & Sistema Modular



Combina excelentes propriedades de redução de pressão com a promoção activa da correcção da postura

A almofada *Invacare Flo-tech Solution XTRA* e o Sistema Modular foram desenvolvidos em conjunto com clínicos para responder às especificidades posturais dos utilizadores de cadeiras de rodas. Através do uso do Sistema Modular, as intervenções terapêuticas tornam-se mais eficazes, promovendo uma correcta postura que facilitará a função e contribuindo para o aumento do conforto e para a preservação da integridade da pele.



Yes, you can.®



Um saco de gel duplo cobre toda a superfície da almofada

A área de contacto entre o utilizador e a almofada é protegida, uma vez que o gel redistribui a pressão para fora das proeminências ósseas. A camada adicional de gel é incorporada por debaixo da zona vulnerável das tuberosidades isquiáticas e sacro, para uma redução mais significativa da pressão. Esta almofada, devido às suas características, é indicada para utilizadores com elevado risco de surgimento de úlceras de pressão.

Capa Impermeável Bi-elástica

A capa bi-elástica é impermeável a líquidos e permeável ao vapor. Dispõe de dois zips: o azul para abrir a capa; o verde para expandir a capa e permitir a colocação dos componentes modulares, assegurando a correcta imersão do utilizador sobre a almofada.

Desenhada para promover correcção activa e gestão da postura

Os componentes modulares são concebidos em espuma CMHR de alta densidade e podem ser usados para facilitar uma correcção activa e gestão da postura. As cunhas têm marcas e fixações de velcro, permitindo o recorte para adequação às necessidades individuais do utilizador. A aplicação

das cunhas por baixo da almofada em combinação com a aplicação dos componentes modulares na superfície, permitem um elevado e versátil conjunto de opções para os terapeutas que implementam intervenções específicas em Posicionamento Sentado.

Características e Opções



Nivelador pélvico

Pode ser colocado em qualquer um dos lados da área isquiática, debaixo da bolsa de fluido. Ajuda a corrigir ou a acomodar obliquidades pélvicas.



Suporte de anca

Pode ser colocado de ambos os lados para promover a estabilização pélvica e o correcto alinhamento da coxa na posição mediana.



Aductor

Aplicado no 1/3 lateral distal do fémur (num ou ambos os lados), reduz a rotação externa e abdução dos membros inferiores.

Características e Opções



Abdutores

Facilita o correcto alinhamento femural. Útil para utilizadores com rotação interna da anca e aducção.



Base rígida

Deve ser colocada sob a base da almofada quando aplicada numa cadeira com tela de assento - favorecer uma base plana para maximizar o posicionamento.



Saco de fluido

Auxilia na redução da pressão ao nível das tuberosidades isquiáticas. Colocado à frente pode inibir o deslizamento anterior do utilizador sobre o assento. Colocado lateralmente, auxilia na gestão de obliquidades pélvicas.



Cunha frontal

Colocada debaixo da almofada promove a estabilização pélvica (acomodação da rotação pélvica posterior/ redução da rotação anterior). Útil, por ex. para promover o correcto posicionamento de utilizadores que têm tendência em deslizar anteriormente sobre o assento.



Cunhas de canto

Indicadas para situações de rotação lateral da anca para promover o correcto alinhamento.

Cunhas laterais

Colocadas lateralmente debaixo da almofada (espuma pode ser recortada para adequação ao tamanho da almofada), promovem a estabilidade lateral da pélvis.



Ultra-fresh™ adicionado a todas as almofadas para protecção antimicrobiana e anti-odor.



Características Técnicas



Matrix Flo-tech Solution Xtra Vários tamanhos disponíveis: 44



Altura 78 mm



Peso 3,08 kg



Peso máx. Utilizador 140 kg




Limpeza 80°



Fabricada segundo as normas Europeias:
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, e BS 7176 (Crib 5)

Cores

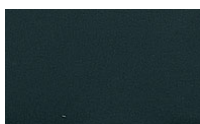

Tecido Preto impermeável

Invacare® | **Matrix® Flo-tech
Solution**



Almofada de baixo perfil com sistema único de bolsa de gel

A almofada *Invacare Flo-tech Solution* é uma almofada de espuma anatômica de perfil baixo, com uma camada superior de gel fluido repartido em 2 bolsas individuais na zona das tuberosidades isquiáticas e do sacro. Os sacos de gel e a espuma moldada de forma anatômica da *Flo-tech Solution* aumentam a superfície de suporte, proporcionando assim um grande nível de protecção para os utilizadores com elevado risco de aparecimento de úlceras de pressão, ou para aqueles que já apresentam lesões nos tecidos.



Yes, you can.®

Base de espuma anatómica de baixo perfil com cobertura de gel

A zona de contacto entre o utilizador e a almofada está protegida por uma secção de gel que redistribui as pressões incluindo nas zonas de maior contacto. Uma camada adicional de gel está situada debaixo da zona isquiática e do sacro para reduzir de forma mais eficaz as pressões, proporcionando um suporte ideal para utilizadores com elevado risco de aparecimento de úlceras de pressão.



Almofada anatómica de baixo perfil

Alguns utilizadores preferem uma almofada de baixo perfil porque se adapta melhor às suas actividades da vida diária. O baixo perfil facilita particularmente as transferências laterais.

Características e Opções



Capa impermeável

Capa bi-extensível, impermeável a líquidos e permeável ao vapor. Base antideslizante e com pega.



Disponível em 44 tamanhos

A almofada *Invacare Flo-tech Solution* está disponível em 44 tamanhos desde 380x410 até 510x460 mm. (Ver tabela dos tamanhos para mais detalhes).



Ultra-fresh™ adicionado a todas as almofadas para protecção antimicrobiana e anti-odor.

Características Técnicas



Matrix Flo-tech Solution

Números de tamanhos : 44



Altura 78 mm



Peso 3.08 kg




Peso máx. Utilizador 140 kg



Limpeza 80°

Fabricada segundo normas Europeias :
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, e BS 7176 (Crib 5)

Cores

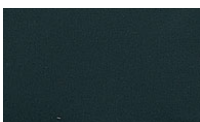

Tecido Preto impermeável

